

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/jumper-elektrostymulator-tens-jpd-es200-p-56834.html>



Jumper Elektrostimulator TENS JPD-ES200

Cena	143,50 zł
Cena poprzednia	175,00 zł
Kod EAN	6951740550017

Opis produktu

Jumper Elektrostimulator TENS JPD-ES200

JPD-ES200 to zaawansowany elektrostymulator TENS, który pomaga w łagodzeniu bólu mięśni ramion, brzucha, pleców i nóg, wynikającego z intensywnej aktywności fizycznej lub codziennych czynności domowych i zawodowych.

Elektrostymulator TENS JPD-ES200 - wyrób medyczny klasy IIa

- kompaktowy rozmiar i niewielka waga zapewniają łatwość przenoszenia
- 5 różnych trybów terapii (masaż, akupunktura, oklepywanie, skrobanie oraz bańki) przeznaczonych do 6 obszarów ciała (ramiona, dłonie, stawy, brzuch, talia i nogi), co daje w sumie 30 programów do wyboru
- dwa kanały, umożliwiające jednocześnie korzystanie przez dwie osoby z tego samego programu
- regulacja intensywności oraz czasu trwania zabiegu
- proste sterowanie i duży ekran LCD
- system ostrzegania o odpadnięciu elektrody automatycznie wstrzymuje zabieg, zwiększając bezpieczeństwo
- urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach bezczynności, co pozwala oszczędzać energię
- zasilanie za pomocą 4 wymiennych baterii AAA

Sposób działania

Mechanizm działania urządzeń do elektrostymulacji opiera się na generowaniu impulsów elektrycznych, które symulują naturalne impulsy w organizmie. Impulsy te są przekazywane przez skórę do nerwów lub włókien mięśniowych za pomocą elektrody.


Skuteczność tej metody została klinicznie potwierdzona przez fizjoterapeutów, opiekunów oraz czołowych sportowców na całym świecie. Wysokoczęstotliwościowe prądy TENS aktywują mechanizmy nerwowe, które blokują ból. **Impulsy elektryczne z elektrod umieszczonych na skórze, w okolicach bolesnych obszarów, stymulują nerwy, aby blokować sygnały bólowe docierające do mózgu, co sprawia, że ból nie jest odczuwany.** Prądy TENS o niskiej częstotliwości wspomagają uwalnianie endorfin, naturalnych środków przeciwbólowych produkowanych przez organizm. **Regularne stosowanie elektrostymulatora na punktach znajdujących się na meridianach wspomaga leczenie i łagodzenie bólu.** Prawidłowe używanie urządzenia nie wywołuje skutków ubocznych.

Urządzenie medyczne klasy IIa

Elektrostymulator TENS JPD-ES200 został poddany rygorystycznym testom i badaniom, w celu upewnienia się, że jest bezpieczny w użytkowaniu w warunkach domowych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, co zapewnia jego trwałość i niezawodność.

Dostosuj do swoich potrzeb

Urządzenie oferuje 5 trybów zabiegu: masaż, akupunktura, oklepywanie, skrobanie i bańki. Zabiegi można dostosować do 6 różnych części ciała: ramion, dłoni, stawów, brzucha, talii i nóg. Dzięki 30 programom do wyboru oraz możliwości regulacji intensywności i czasu trwania zabiegu, urządzenie zapewnia wszechstronne i efektywne działanie.

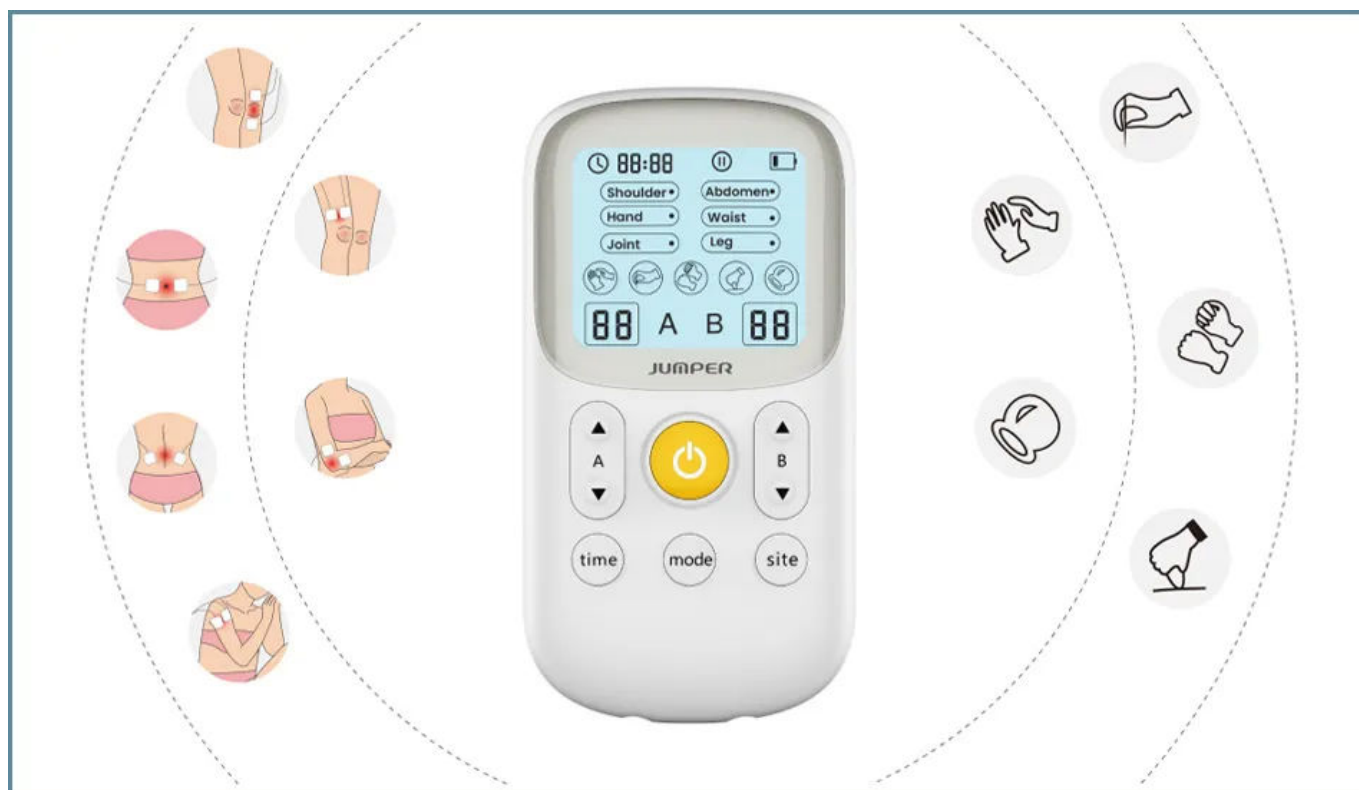

Duży i czytelny wyświetlacz

1. Poziom naładowania baterii
2. Tryb bańki
3. Intensywność kanału B
4. Tryb drapanie
5. Tryb oklepywanie
6. Tryb akupunktura
7. Intensywność kanału A
8. Tryb masaż

Budowa urządzenia

1. Intensywność +/- dla kanału B
2. Wybór obszaru działania
3. Wybór trybu
4. Port dla kanału B
5. Port dla kanału A
6. Ustawienie czasu
7. Intensywność +/- dla kanału A
8. Strat/Pauza/Wyłączenie

W zestawie:

- Elektrostymulator Jumper JPD-ES200
- Elektrody 4szt.
- Przewód elektrody 2szt.
- Bateria AAA 4szt.
- Woreczek do przechowywania
- Instrukcja obsługi

Marka: Jumper

Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.

Gwarancja: 2 lata

Model: JPD-ES200

Rodzaj urządzenia: Elektrostymulator TENS

Rozmiar elektrody: 50 x 50 mm

Prąd wyjściowy: Maks. 48 mA (przy obciążeniu 500 omów), dopuszczalne odchylenie $\pm 20\%$
Szerokość impulsów: 150-200 μs , dopuszczalne odchylenie $\pm 20\%$
Częstotliwość impulsów: 1-120 Hz, dopuszczalne odchylenie $\pm 20\%$
Intensywność wyjściowa: 0 do 15 poziomów, regulowana
Zasilanie: Prąd stały 6 V, Baterie AAA 4 szt
Wymiary jednostki głównej: 121,8 x 63,6 x 22,2 mm
Waga jednostki głównej: 86 g (bez baterii)

