

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/opatrunek-na-poranione-i-bolesne-brodawki-sutkowe-nursicare-zestaw-6-sztuk-p-54248.html>



Opatrunek na poranione i bolesne brodawki sutkowe Nursicare zestaw 6 sztuk

Cena

79,99 zł

Opis produktu

Nursicare® to przełomowy produkt w walce z bólem i podrażnieniami brodawek sutkowych podczas karmienia piersią. Dzięki zaawansowanej technologii Nursicare® znacząco przyspiesza procesy gojenia i leczy poranione, podrażnione oraz bolące brodawki sutkowe w okresie karmienia piersią.

Opatrunek Nursicare® jest wykonany z miękkiej i elastycznej pianki poliuretanowej, która dopasowuje się do anatomicznej budowy piersi. **Składniki opatrunku zapewniają idealne środowisko gojenia, stale oczyszczają i nawilżają ranę.** Dzięki temu ograniczony zostaje stan zapalny, a karmienie piersią jest zdecydowanie mniej bolesne. Poprzez stałe przyleganie do brodawek, Nursicare® zabezpiecza je dodatkowo przed bolesnym ocieraniem o biustonosz, tak by proces gojenia przebiegał najszybciej jak to możliwe.

Cenne składniki, naturalnie występujące w kobiecym mleku są zatrzymywane wewnątrz opatrunku i wykorzystywane by wspomagać i jeszcze bardziej przyspieszyć procesy gojenia.

Nursicare® w przeciwieństwie do maści na bazie lanoliny **nie pozostawia skóry tłustej**, lepkiej i nieprzyjemnie pachnącej. Przed przystawieniem dziecka nie musisz również przemywać piersi.

Opatrunek **nie jest przyklejany** do skóry, więc jego zmiana jest całkowicie bezbolesna.

Bezpieczny dla Ciebie i Twojego dziecka

Składniki zawarte w Nursicare są w 100% neutralne dla Twojego dziecka i nie wpływają na skład mleka. Nie wymaga mycia piersi przed rozpoczęciem karmieniem.

Niweluje ból podczas karmienia piersią

Nursicare® został tak zaprojektowany, by otulał sutek a składniki w nim zawarte dzięki unikalnej technologii szybko i skutecznie łagodziły ból. Dzięki Nursicare® w bardzo krótkim czasie poczujesz ulgę i będziesz mogła kontynuować karmienia piersią.

Przyspiesza gojenie Twoich brodawek.

Nursicare® wspomaga naturalny proces gojenia m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego nawilżenia uszkodzonej skóry, dzięki czemu brodawka staje się elastyczna i miękka. Zawarty w opatrunku surfaktant zapewnia biologiczną czystość i ogranicza proces zapalny.

Ból brodawek sutkowych podczas karmienia

Nursicare® to prawdziwy przełom w walce z bólem podczas karmienia piersią i leczeniu ran brodawek sutkowych.

Nursicare® należy do rodziny opatrunków PolyMem®, znanych na całym świecie z zaawansowanych właściwości wspomagających leczenie ran oraz o udowodnionym działaniu łagodzącym ból.

Badania naukowe pokazują, że **Nursicare® jest zdecydowanie bardziej skuteczny** niż jakiegokolwiek kremy na bazie

lanoliny.

NURSICARE® został stworzony by pomóc Tobie gdy podczas karmienia piersią napotkasz trudności.

Ból który Tobie odbiera przyjemność z najbardziej intymnych chwil z Twoim dzieckiem, jest podstawową przyczyną zaprzestania naturalnego karmienia na świecie. NURSICARE® dzięki swojej budowie i składnikom zmniejsza ból a tym samym zwiększa szanse, że karmienie malucha będzie wspinałym doświadczeniem.

Składniki wykorzystane podczas produkcji NURSICARE® są bezpieczne zarówno dla Ciebie jak i Twojego dziecka. NURSICARE® zakwalifikowany został jako sterylny wyrób medyczny klasy 1a co gwarantuje, że produkt może być stosowany przez długi czas bez żadnego ryzyka.


Skład NURSICARE®


- **Pianka poliuretanowa** – stanowi bazę NURSICARE®. Jest nośnikiem składników aktywnych, a dzięki swojej porowatej strukturze, ma działanie „mikroVAC”, które zwiększa miejscowo ukrwienie tkanek i działa przeciwzapalnie.
- **Gliceryna** – substancja szeroko wykorzystywana w medycynie. Zapobiega przyklejaniu się NURSICARE® do skóry, a także jest źródłem energii dla nowo tworzących się komórek naskórka.
- **SURFAKTANT F68** – środek uwalniany z NURSICARE® na powierzchnię skóry, gdzie ma działanie powierzchniowo czynne. Odpowiada za stałe oczyszczanie uszkodzonej skóry a także w połączeniu z absorbentem i strukturą pianki, ma udowodnione miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Surfaktant F68 jest składnikiem klasy farmaceutycznej o udowodnionej „obojętności” dla dziecka i składu mleka kobiecego.
- **Kopolimer skrobi** – Absorbent zapewniający utrzymanie odpowiedniej wilgotności skóry. Zatrzymuje wewnątrz NURSICARE® mleko kobiece, co umożliwia wykorzystanie jego właściwości leczniczych w walce z bólem i rankami na brodawkach sutkowych.

Potencjalne alergen: gliceryna

Jak stosować NURSICARE

- Przed założeniem NURSICARE® zwilż go delikatnie wodą co pozwoli aktywować jego składniki aktywne. Opatrunek jest gotowy do założenie gdy stanie się śliski pod palcem.
- Zakryj bolącą brodawkę tak by znajdowała się pośrodku NURSICARE® – część z krateczką powinna znajdować się na zewnątrz. Załóż stanik, który przytrzyma NURSICARE® w odpowiednim miejscu.
- Na czas karmienia zdejmij NURSICARE® np. na czystą pieluszkę z obydwu piersi. Możesz osuszyć skórę byś czuła się komfortowo.
- Po zakończeniu karmienia sprawdź czy NURSICARE® nadal jest śliski pod palcem (wtedy nadaje się od razu do ponownego użycia) oraz czy nie jest nadmiernie przemoczony (na stronie z krateczką pojawiła się „mokry ślad” sięgający krańca krążka).
- Załóż NURSICARE® aż do ponownego karmienia.

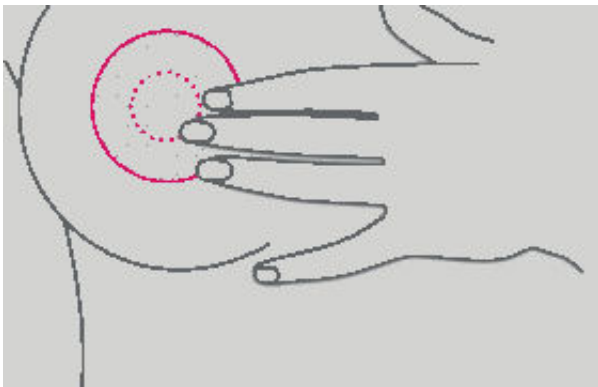

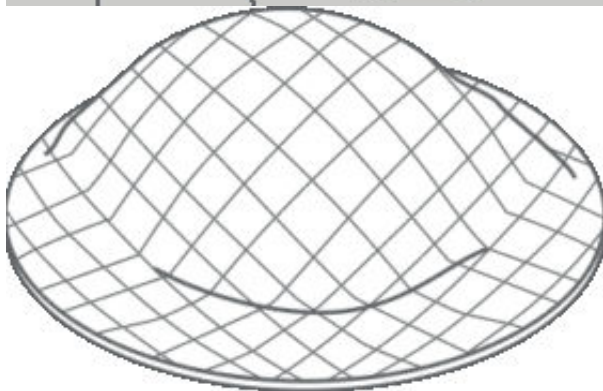

Wyrób medyczny.

**To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą*